


Ventana Reagenzien

CONFIRM Ki-67

(Klon 30-9)

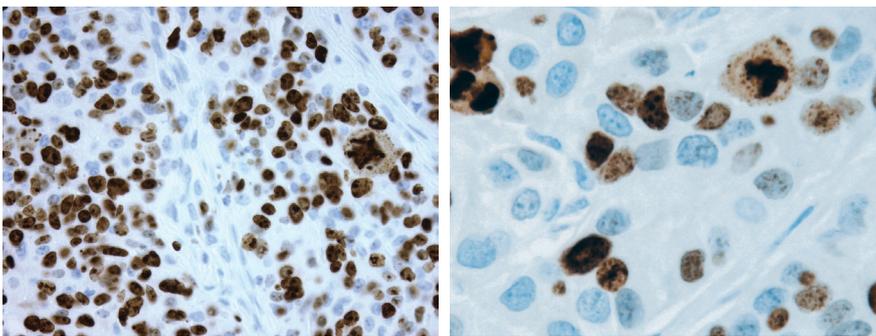


Der CONFIRM Ki-67 (30-9) ist ein monoklonaler Kaninchen-Antikörper (IgG), der gegen die C-terminale Domäne des Antigens Ki-67 gerichtet ist. Die Kernfärbung kann zur Beurteilung der Proliferationsaktivität in normalem und neoplastischem Gewebe herangezogen werden. Der CONFIRM Ki-67 (30-9) dient zum Nachweis von proliferierenden Zellen in Gewebeschnitten von formalinfixiertem, paraffineingebettetem Gewebe in einem Ventana Färbeautomaten.

Der Primärantikörper wurde bereits optimal verdünnt und kann direkt mit den Detektionssystemen auf den Färbeautomaten von Ventana eingesetzt werden. Das Ki-67 Antigen tritt in der G1-, S-, G2- und M-Phase des Zellzyklus auf, fehlt aber in der G0-Phase (Ruhephase). Dieser Antikörper ist für die Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik (IVD) zugelassen.

PRIMÄR ANTIKÖRPER

- ✓ Monoklonal, Kaninchen
- ✓ Kompatibel mit Ventana Bildanalyzesystem (VIAS)
- ✓ Für die *In-vitro*-Diagnostik (IVD)




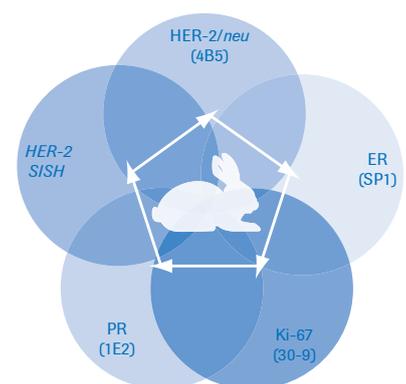


CONFIRM Ki-67 ist Bestandteil des Ventana Biomarker Panels zur diagnostischen Untersuchung von Brustkrebskrankungen.

CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper

Testtyp	Antikörper für die Immunhistochemie
Artikelnr.	790-4286 (50 tests) 05278384001
Klon	30-9
Menge	5 ml Spender (50 Tests)
Lagerung	2-8 °C
Inkubationszeit	16-32 Minuten in Färbeautomaten vom Typ NEXES oder BENCHMARK <i>Serie</i>
Zulassungsstatus	IVD

Artikelnummern von Ventana in schwarz, Artikelnummern von Roche in blau

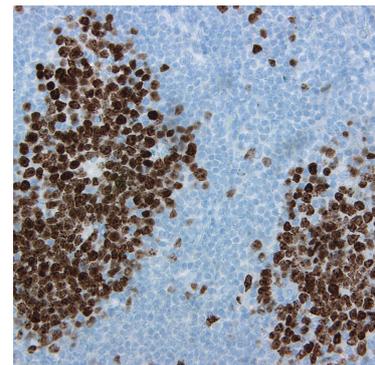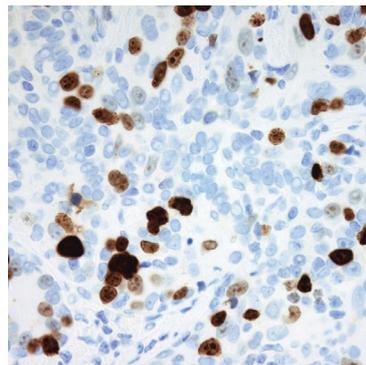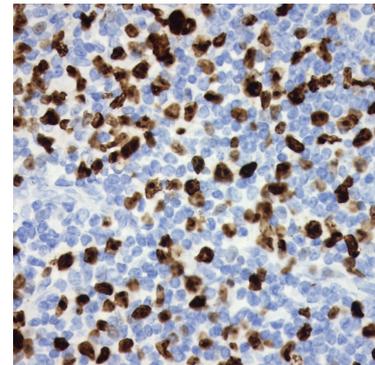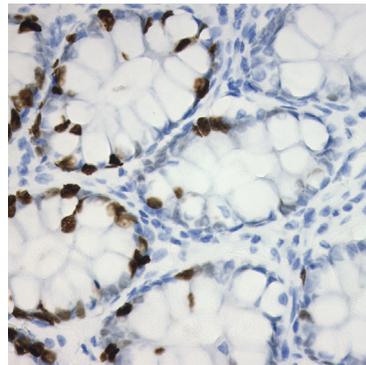

Patient Centred Pathology

WORKFLOW | DIAGNOSTICS

Ventana, BENCHMARK, CONFIRM and NEXES are trademarks of Roche.
E889 0708B DE

European Headquarters
Ventana Medical Systems, S.A.
Parc d'Innovation - BP 30144
Rue G. de Kaysersberg
F - 67404 Illkirch CEDEX
France
Tel. + 33 (0)3 90 40 52 00

Roche Diagnostics AG
Forrenstrasse
6343 Rotkreuz (ZG)
Switzerland
Tel. +41 (0) 41 7992244

Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3
1211 Wien
Austria
Tel. +43 (0) 1 277870

EC	REP
----	-----

Roche Diagnostics GmbH
Sandhoferstrasse 116
68305 Mannheim
Germany
Tel. +49 (0)621 7590

www.ventanamed.com

© 2009 Ventana Medical Systems

