

BenchMark ULTRA **PLUS**

Mehr Zeit für das Wesentliche





Optimierter Workflow

Mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit schaffen Sie Zeit für die wesentlichen Tätigkeiten:


- Der neue Remotezugriff ermöglicht, Systemdaten von anderen im lokalen Netzwerk befindlichen Computern zu managen
- Die intuitive Software ermöglicht mit intelligenten Filtern eine einfachere Navigation
- Die VSS 14.x-Software verfügt über neue und erweiterte Berichtsfunktionen, einschließlich der QA/QC
- Dekontamination in unter 90 min



200+

Ready-to-use Tests

Umfassendes Portfolio

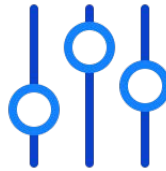

Flexible Lösungen

Der Anwender im Zentrum: Neuheiten basierend auf kontinuierlichem Kundenfeedback

- Neuer integrierter Touchscreen reduziert Engpässe, indem viele Funktionen direkt am Gerät ausgeführt werden können
- Neue geräteeigene Lösung für das Abfallmanagement baut DAB auf weniger als 5 ppb ab und erfüllt damit auch strenge Anforderungen für die Entsorgung ungefährlicher Abfälle
- Möglichkeit der Lot-to-Lot Validierung in einem Lauf
- Die neue ausziehbare Ablage bietet zusätzlichen Platz zum Arbeiten am Instrument



30+

Jahrelange bewährte Erfahrung

Innovative Automatisierungstechnik



Bewährte Qualität

Die bewährte BenchMark-Technologie liefert die richtige Färbung zur richtigen Zeit:

- Flexible, unabhängige Temperaturregelung zur individuellen Optimierung der Objektträgerfärbung
- Bewährte Färbetechnik mit Air Vortex Mixer, wodurch eine einheitliche Reaktionskinetik auf der gesamten Oberfläche entsteht
- 30 unabhängige Reaktionskammern mit kontinuierlicher Zugriffsmöglichkeit
- Kombination von Tests jeder Art zu jedem Zeitpunkt - IHC und ISH



200+

Pharma und Biotech Partner

Personalisierte Medizin

Was den BenchMark ULTRA PLUS einzigartig macht...

- Optimierter Workflow mit bewährter, individueller Slide Staining Technologie
- Diverse Zugriffsmöglichkeiten auf die System Software
- Vollautomatische DAB Degradierung



Lichtsignale

- visualisieren den Instrumentenstatus

Integrierter Touchscreen

- Ausführen von Gerätefunktionen, ohne den Host-Computer aufzusuchen

Bewährte BenchMark ULTRA Färbetechnologie

- Kapazität von 30 Objektträgern und 35 Reagenzien
- Unabhängiges Laden von Objektträgern und Anpassung des Objektträgerprotokolls

Ausziehbare Ablage

- Für eine einfache Reagenzien- und Objektträgerbeladung

Beladung mit Vorratsreagenzien

- Farbcodierte Reagenzienclips für eine intuitive Reagenzienbeladung
- Jederzeit nachfüllbar ohne Prozessunterbrechung

Geräteeigene Lösung für die Abfallentsorgung


- Automatische Abtrennung der Ölbestandteile und Degradierung des DAB

Intuitive und schnelle Kommunikation über die Software

- Die Benutzeroberfläche der VSS 14.0 Software wurde für eine intuitive Bedienung und eine Optimierung der Arbeitsabläufe entwickelt
- Nahtlose Integration mit dem gesamten Portfolio bestehender und zukünftiger Assays

Lokaler Zugriff und Fernzugriff für mehr Flexibilität

- Verfolgen, verwalten und vervollständigen von Qualitätsaufzeichnungen am Host-Computer oder per Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk
- Anzeige und Verwaltung des registrierten IHC/ISH-Reagenzienbestands

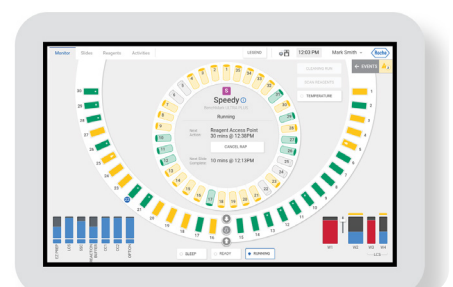

Roche Tissue Diagnostics
1910 E. Innovation Park Drive
Tucson, AZ 85755
USA
1 520 887 2155
1 800 227 2155

roche.com
diagnostics.roche.com

© 2022 Roche

BENCHMARK is a trademark of Roche. All other trademarks are property of their respective owners.
MC--09349